


BRAILLEX[®] EL 80s

Klassiek Model met innovatieve functionaliteit

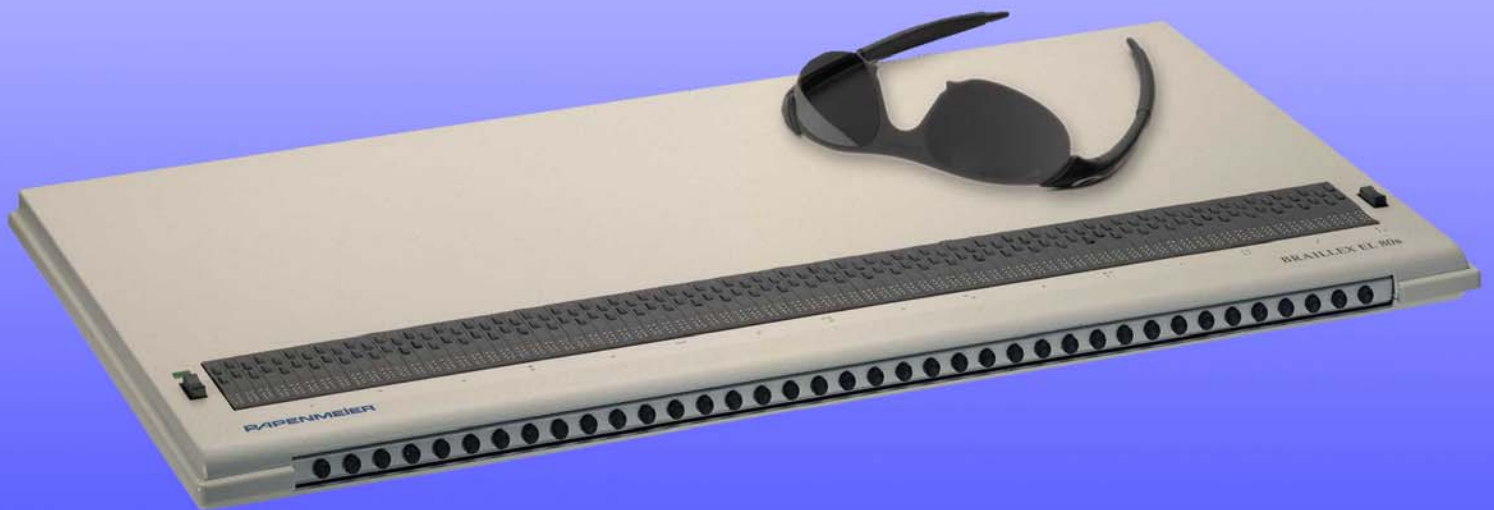

PAPENMEIER

Technology for the blind

BRAILLEX® EL — De Efficiency Line

De nieuwste serie brailleleesregels van Papenmeier biedt optimale ergonomie voor de braillelezers. Ze zijn uitgerust met de Intelligente Navigatie Balk. Dit is één lange toets die zich aan de voorzijde van de leesregel bevindt en wel over de volle breedte. De BRAILLEX Efficiency Line biedt een ruime keuze in verschillende typen leesregels om te kunnen voldoen aan uw individuele en specifieke wensen.

De traditionele brailleleesregels hebben een aantal aan de voorkant, links of rechts geplaatste functie toetsen. Sommige gebruiken het numerieke toetsenbord om de leesregel te besturen. In alle gevallen dient u uw handen van de brailleleesregel af te halen als u over het scherm wilt navigeren of de computer wilt bedienen.

Met de Navigatie Balk kunt u tijdens het lezen commando's geven vanaf elke plaats op de leesregel. Dit betekent minder zoeken met uw handen, meer comfort en hogere verwerkingssnelheid. Dat is dan ook de reden dat wij onze nieuwe productlijn de "BRAILLEX Efficiency Line" hebben genoemd.

BRAILLEX EL 80s: Klassiek Model met innovatieve functionaliteit

BRAILLEX EL 80s is voorzien van 80 braille-cellen voor het lezen van het computerscherm.

BRAILLEX EL 80s heeft dubbele "routing keys" welke vriendelijk in gebruik zijn, ook zijn ze geïntegreerd in de Braille cellen, met als voordeel een minimale afstand welke overbrugt dient worden met uw vingers. Dit betekent een exacte en comfortabele besturing. De dubbele "routing keys" beide maximale flexibiliteit met uw favoriete screen reader.

Dankzij de USB "plug & play" en "hot swap" mogelijkheden kunt u eenvoudig de brailleleesregel op uw computer aansluiten.

Papenmeier specialist in vernieuwingen

Al meer dan 30 jaar ontwerpt en fabriceert Papenmeier leesregels op het een hoog technologische niveau ten behoeve van visueel gehandicapten.

Vele keren werd Papenmeier onderscheiden met een prijs als erkenning voor haar betrokkenheid bij de verbetering van communicatieve en educatieve mogelijkheden voor de blinden en de slechtzienden. De BRAILLEX leesregels van Papenmeier worden wereldwijd geleverd naar meer dan 30 landen.

Technische specificaties:

- 80 Braille cellen met geïntegreerde cursor routing keys
- Aansluiting met computer via seriële poort of USB poort
- Netvoeding 100 - 240 VAC / geen netspanning nodig bij USB-aansluiting
- Werkt met alle bekende screenreader programma's
- Compleet uitgerust met verbindingkabels
- Afmeting: 569 x 277 x 22 mm mm
- Gewicht: 2,4 kg

PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Reha Division · Talweg 2 · 58239 Schwerte, Germany
Phone: +49-2304-946 0 · Fax: +49-2304-946 246 · info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de